

DVAS


Intraorální Standardní RTG Systém



DVAS

SÉRIE od Genoray

Společnost Genoray, poháněná vášní pro rentgenovou technologii, se zavázala neustále zdokonalovat své produkty a přispívat tak ke zdravějšímu životu.

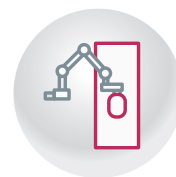

DVAS-C

Verze se sedátkem - Fixní

- Šířka : 466 mm
- Výška : 2061 mm
- Hloubka : 1141 mm
- Hmotnost : 44 kg $\pm$ 5 %



DVAS-C

Verze se sedátkem - Sklápěcí

- Šířka : 466 mm
- Výška : 2061 mm
- Hloubka : 1141 mm
- Hmotnost : 42 kg $\pm$ 5 %



DVAS-M

Mobilní verze

- Šířka : 748 mm
- Výška : 1894 mm
- Hloubka : 1663 mm
- Hmotnost : 34 kg $\pm$ 5 %



DVAS-W

Nástěnná verze

- Šířka : 200 mm
- Výška : 1111 mm
- Hloubka : 2448, 2194, 2067, 1940 mm
- Hmotnost : 22 kg $\pm$ 5 %



DVAS-C

Verze se sedátkem - Fixní

- Šířka : 466 mm
- Výška : 2061 mm
- Hloubka : 1141 mm
- Hmotnost : 44 kg $\pm$ 5 %



DVAS-C

Verze se sedátkem - Sklápěcí


- Šířka : 466 mm
- Výška : 2061 mm
- Hloubka : 1141 mm
- Hmotnost : 42 kg $\pm$ 5 %



Rozměry

Verze se sedátkem - **Fixní**, **Sklápěcí**

Jednotka : mm

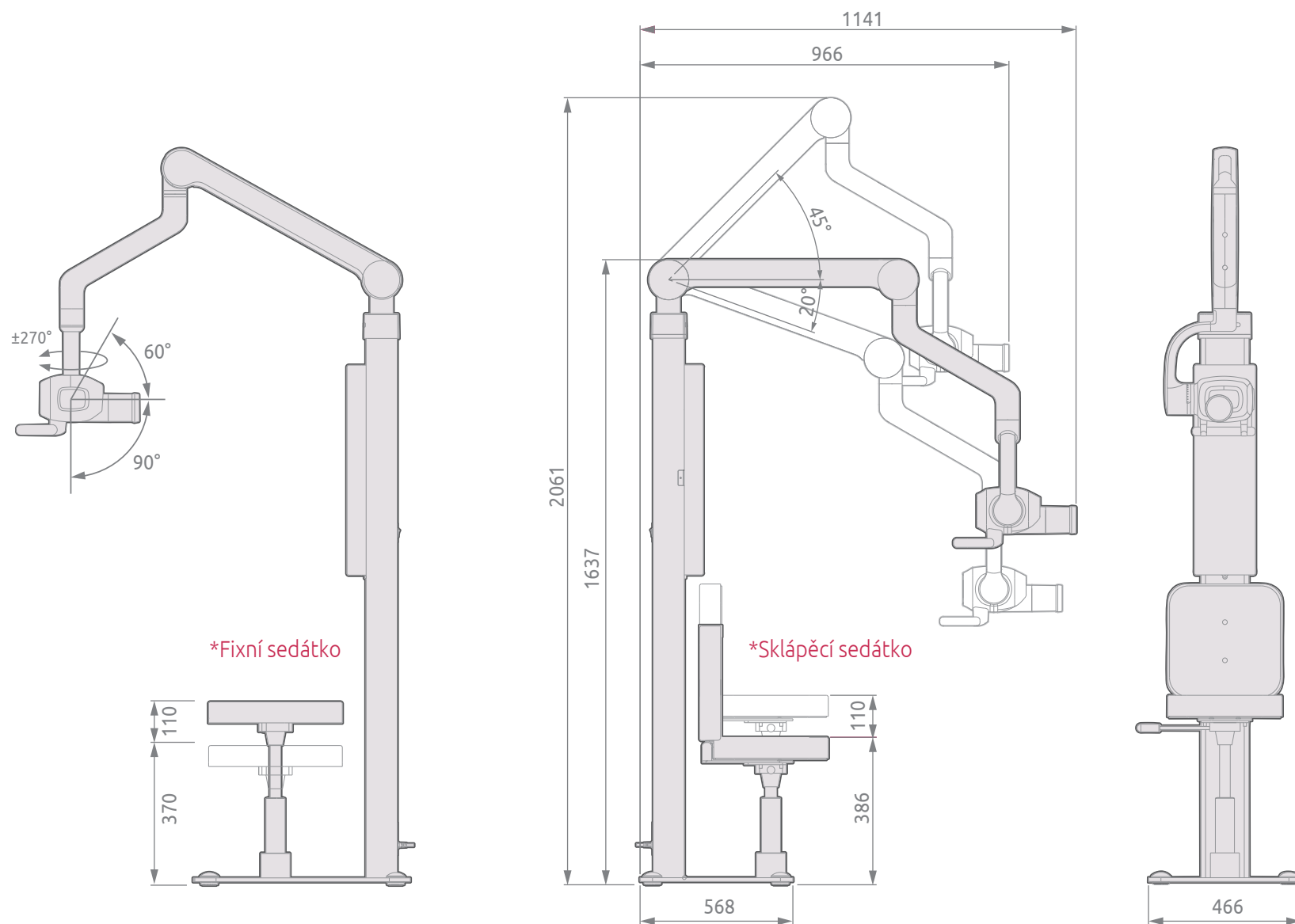



DVAS-M


Mobilní verze


- Šířka : 748 mm
- Výška : 1894 mm
- Hloubka : 1663 mm
- Hmotnost : 34 kg $\pm$ 5 %

Rozměry

Mobilní verze

Jednotka : mm

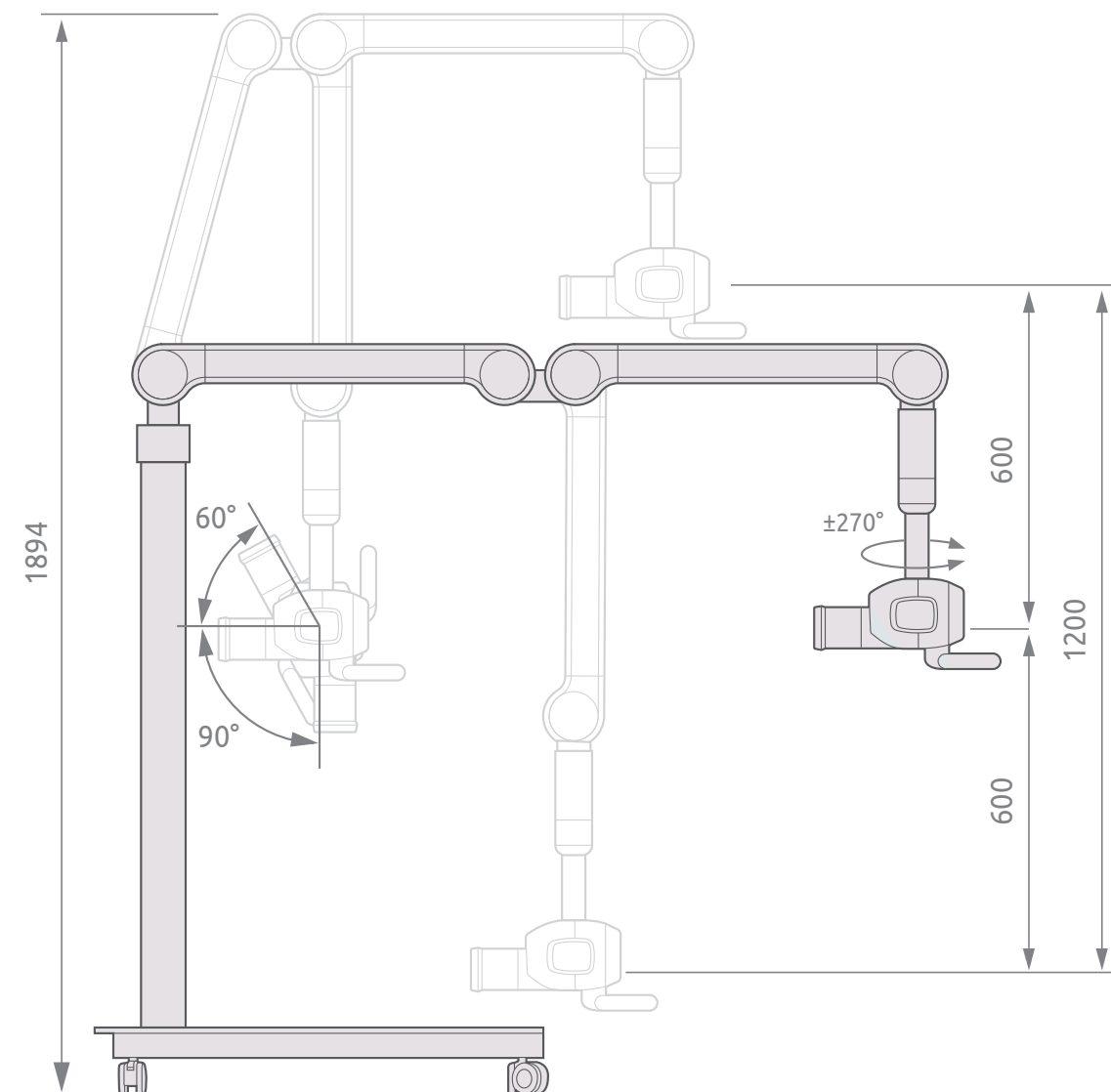

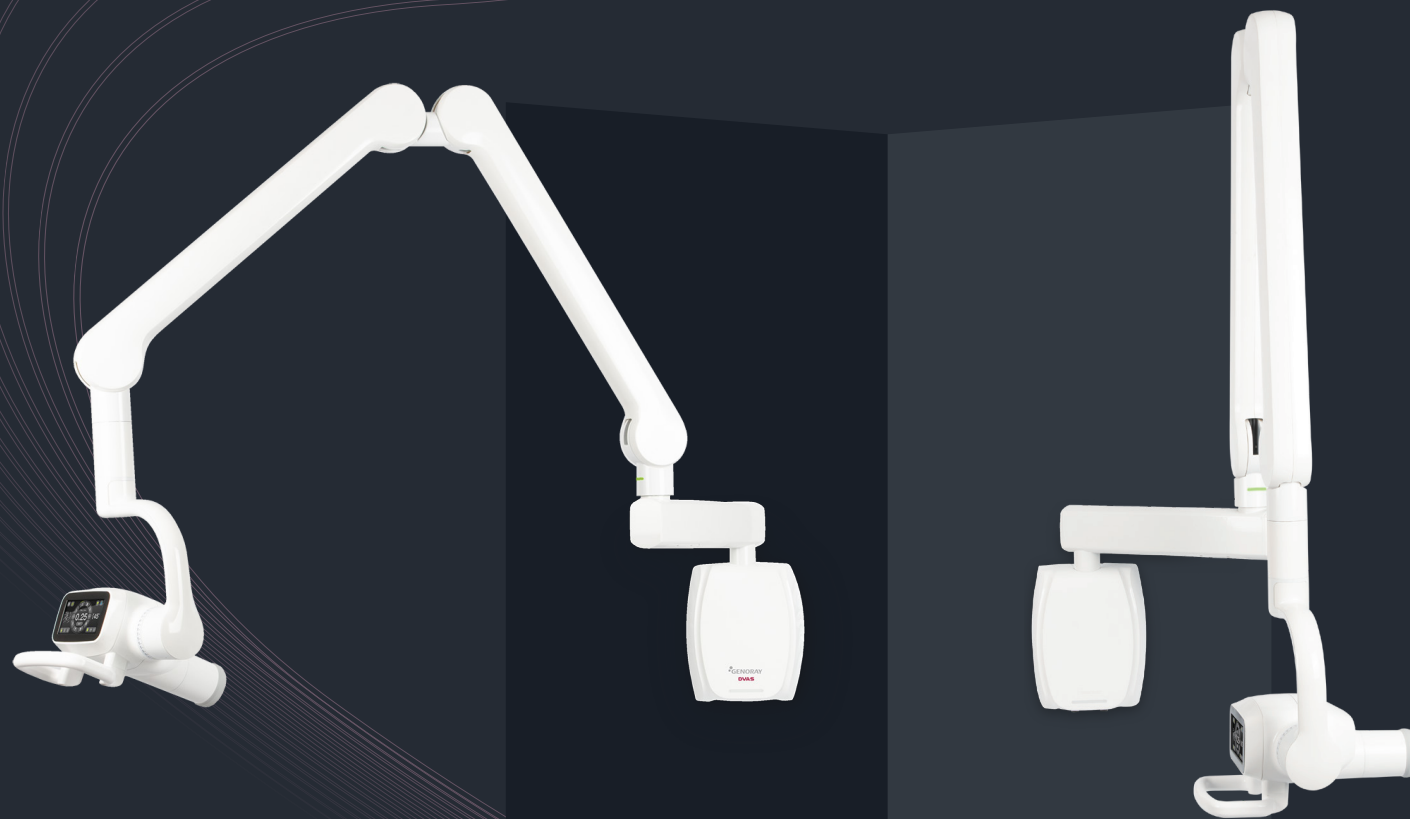

DVAS-W

Nástěnná verze


- Šířka : 200 mm
- Výška : 1111 mm
- Hloubka : 1940 mm / 2067mm / 2194 mm / 2448 mm
- Hmotnost : 22 kg ± 5 % / 22.6 kg ± 5 % / 23.3 kg ± 5 % / 24.6 kg ± 5 %

■ Standard ■ Volitelné

Rozměry **Nástěnná** verze


■ Standard ■ Volitelné

Jednotka : mm

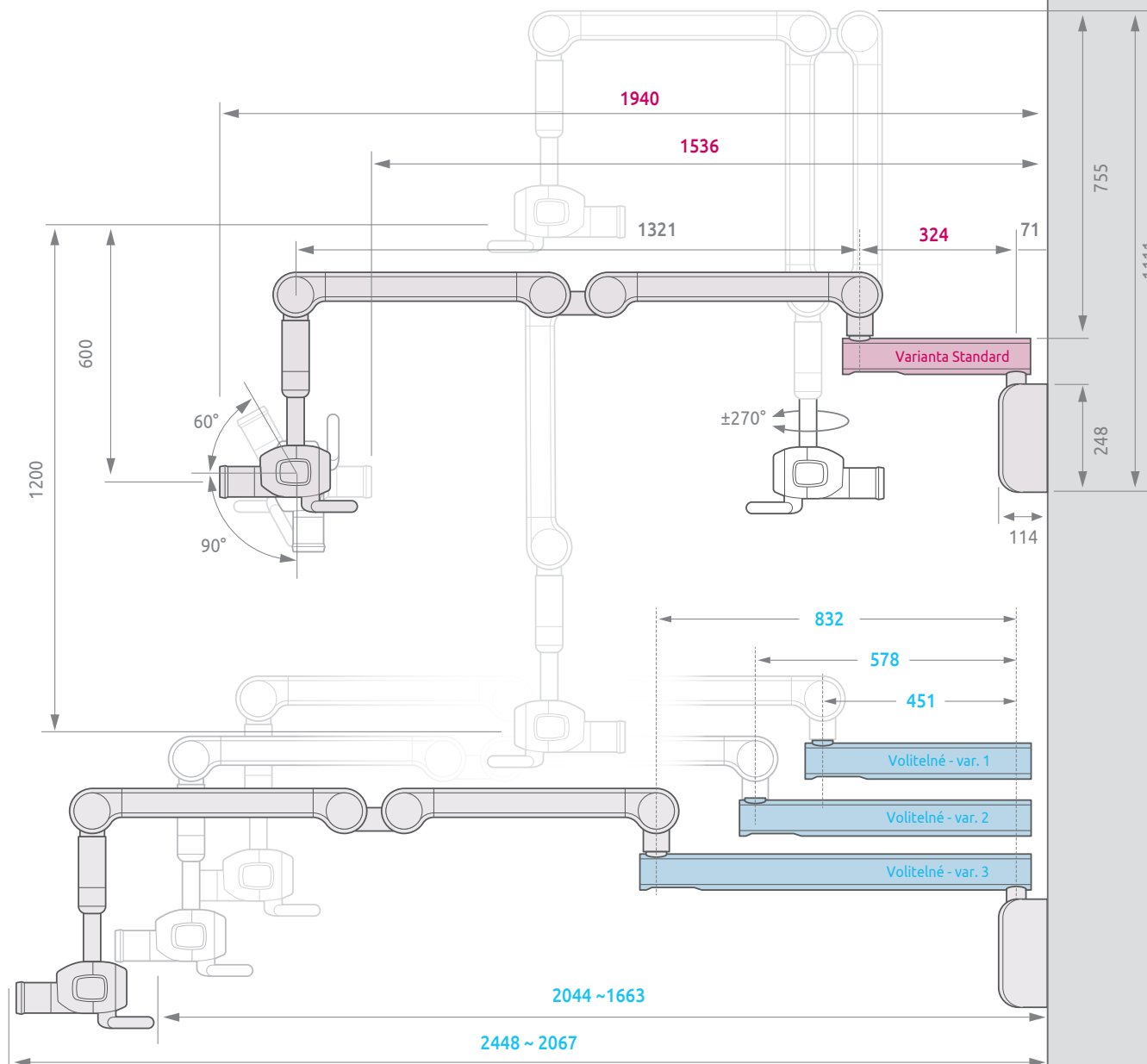

Funkce


Velikost ohniska

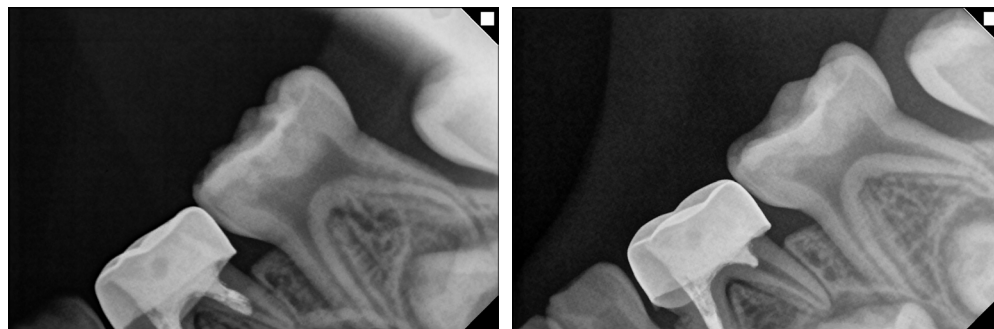

Ohnisko 0.8 mm

DVAS ohnisko 0.4 mm

Klinické snímky

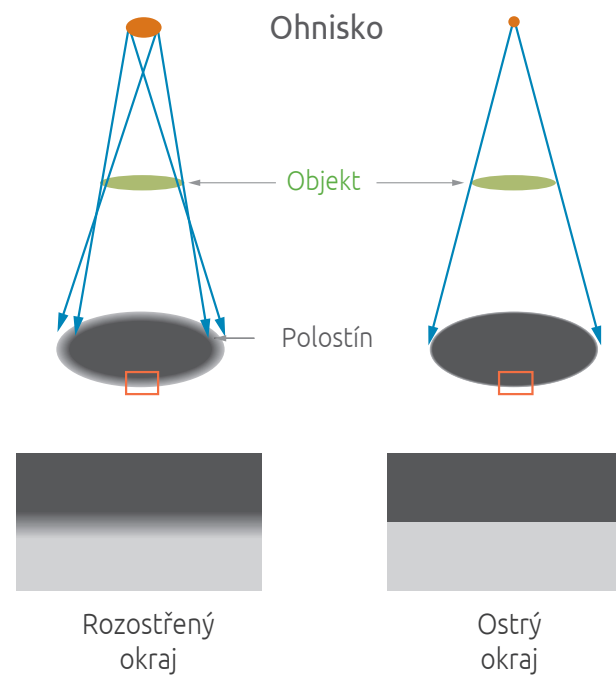



Opěrka hlavy
pro polohování

LED osvětlení

Pomocné LED osvětlení pro přesné
napolohování rentgenové hlavičky



Dotyková
obrazovka



Barevný LED indikátor



Připraveno



Chyba




RTG expozice



Chladnutí


Komfortní uživatelské prostředí

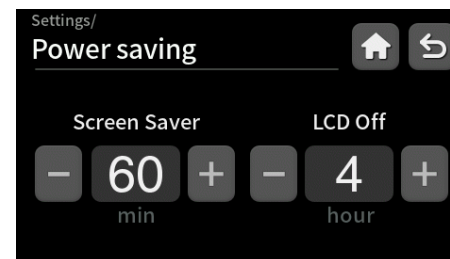


Úsporný režim




Indikátor RTG záření

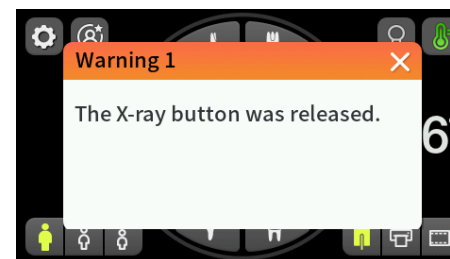

Vlastní detekce chyb

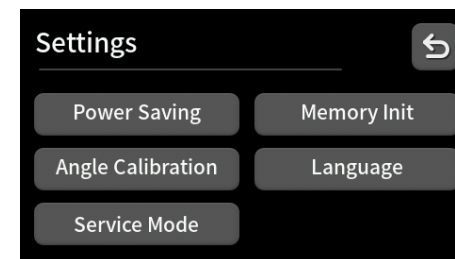

Nastavení

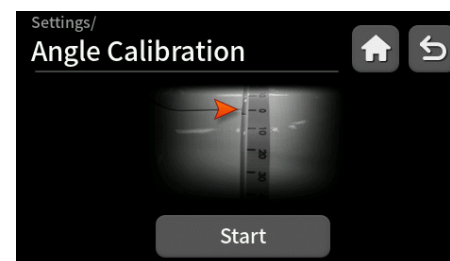

Korekce úhlu



Nastavení jazyka

Režim průvodce

Po stisknutí tlačítka se automaticky zobrazí průvodce polohováním pro expozici dle zvoleného úhlu.



Specifikace

Údaj	Specifikace
Nominální velikost ohniska	0.4 mm
Jmenovité napětí rentgenky	70 kV
Jmenovitý proud rentgenky	2 mA
Jmenovité síťové napětí	100–240 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý síťový proud	3.7 A (100 V) – 1.3 A (240 V)
Rozsah jmenovitého napětí	±10 %
Expoziční čas	0.05 – 1.6 s
Celková filtrace	2.2 mm Al
Vzdálenost zdroje od kůže (SSD)	200 mm Min
Polovrstva	2.7 mm Al
Předvolby záznamového média	Digitální senzor
	Paměťová fólie (CR)
	Film





GENORAY DĚLÁ
NEVIDITELNÉ VIDITELNÝM



GENORAY Co.,Ltd.

T +82-31-5178-5500
E genoray@genoray.com
W www.genoray.com

GENORAY America Inc.

T +1-855-436-6729
E inquiry@genorayamerica.com
W www.genorayamerica.com

GENORAY EU GmbH

T +49-30-50969498
E info@genorayeuropa.com
W www.europe.genoray.com

GENORAY Japan

T +81-45-620-4971
E Info@genorayjapan.co.jp
W www.genorayjapan.co.jp

GENORAY Türkiye

T +90-216-463-57-37, +90-216-463-57-53
E genorayturkiye@genoray.com
W www.turkiye.genoray.com

GENORAY Shanghai

T +86-021-6785-8538
E genoraychina@genoray.com
W www.genoray.com.cn



* Tento rentgenový přístroj může být nebezpečný pro pacienta i obsluhu, pokud nejsou dodrženy bezpečné expoziční faktory a provozní pokyny.