



GenX-CR

Dentální Skener
Paměťových Fólií

 **GENORAY**

GenX-CR

Dentální Skener Paměťových Fólií



- Kompaktní design
- Uživatelsky přívětivý skener
- Excelentní kvalita snímků

Komponenty



Barevná provedení

-  Černobílá
-  Bílá

Paměťová fólie



VEL. 0 (31x22 mm)



VEL. 1 (40x24 mm) *Volitelné



VEL. 2 (41x31 mm)



VEL. 3 (54x27 mm) *Volitelné

GenX-CR Funkce



4.3" Dotyková obrazovka

Pohodlné ovládání pomocí dotykového displeje



please wait...

Obrazovka s průvodcem


Snadné sledování pokynů díky intuitivnímu grafickému rozhraní



Vícejazyčný

Podpora 12 jazyků včetně:

Angličtiny, Čínštiny (Zjednodušené/Tradiční), Korejštiny, Japonštiny, Němčiny, Španělštiny, Francouzštiny, Italštiny, Thajštiny, Turečtiny, Ruštiny, Arabštiny.

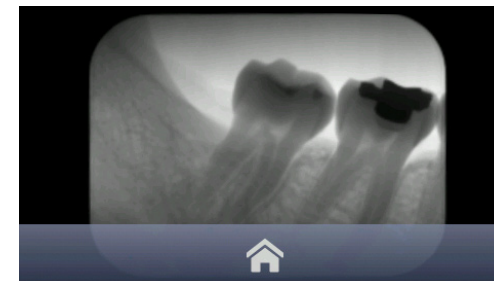


Funkce náhledu

Prohlédněte si po každém skenování snímky na LCD displeji

GenX-CR Funkce

MPPC (Multi-Pixel Photon Counter)


Snímek s vysokým rozlišením díky MPPC s vysokou účinností detekce fotonů.

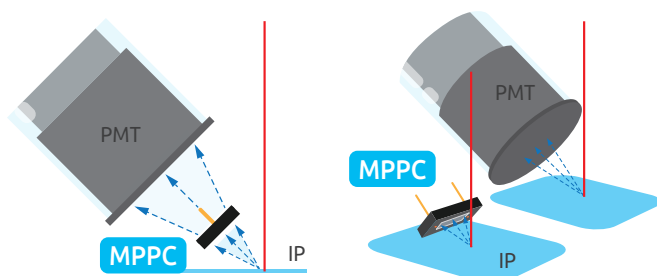

Interní Paměť

Uložení až 500 snímků v GenX-CR

Pro více uživatelů

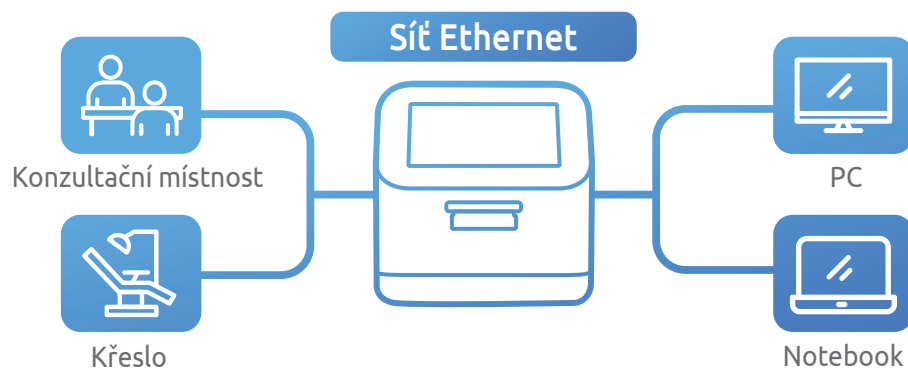

Lehký a kompaktní skener

1,9 kg v kompaktním provedení. Pro použití bez nároků na prostor.

Klinické snímky

Součástí přístroje je sada nejčastěji používaných paměťových fólií. Kromě toho je k dispozici celý rozsah velikostí paměťových fólií, včetně velikosti 0, 1, 2, 3.

VELIKOST 0

31 x 22 mm



VELIKOST 1

40 x 24 mm *Volitelné




VELIKOST 2

41 x 31 mm




VELIKOST 3

54 x 27 mm *Volitelné

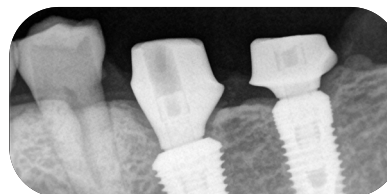

Postup


Krok 1

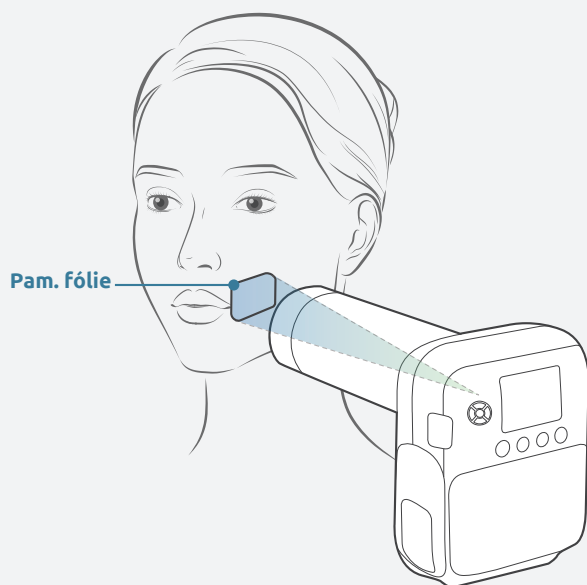

Vložte pam. fólii/ Proved'te expozici

Proved'te expozici intraorálním RTG

Krok 2

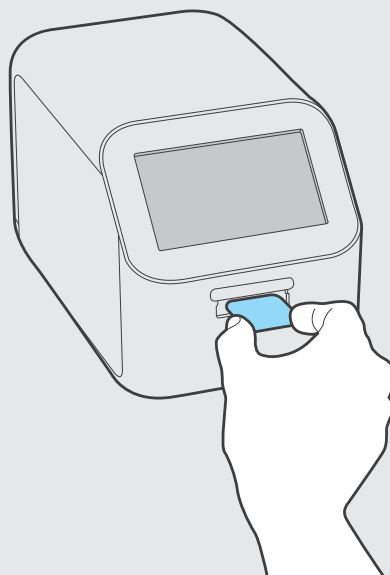

Skener pam. fólií

Zvolte velikost> Vložte fólii> Skenujte
> Zkontrolujte snímek

Krok 3




Zkontrolujte připojený PC

Zobrazte snímky v SW Portview

Uživatelské rozhraní




- | | | |
|------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 1. Náhled | 5. Nastavení rozpoznání pam. fólie | 9. Výběr pam. fólie |
| 2. Nastavení rozlišení | 6. Nastavení | 10. Text průvodce |
| 3. Režim spánku | 7. Zobrazení data/času | 11. Skenování |
| 4. Nastavení zvuků | 8. Síťové připojení | |

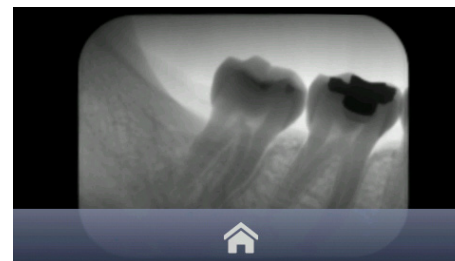


Náhled




Nastavení jazyka

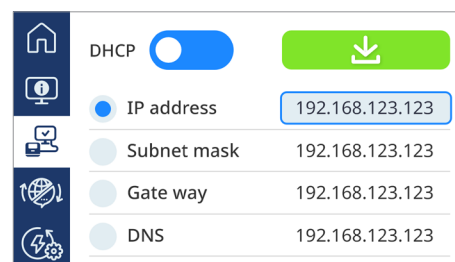

Síťové nastavení

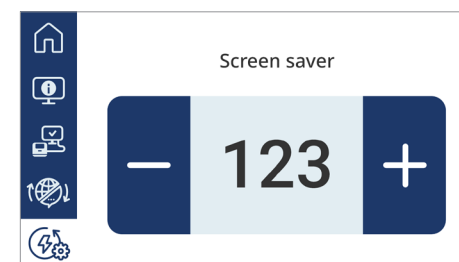

Nastavení času pro režim spánku

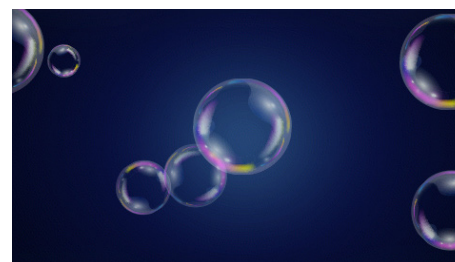

Režim spánku

Specifikace

Rozlišení (udávané)	20 lp/mm
Podporované velikosti PF	0, 1, 2, 3
Stupně šedi snímku	16 bitů (65,536 stupňů šedi)
Doba čtení	do 9 sekund
Mazání	Vestavěné automatické mazání
PC rozhraní	10/100 Mbps Ethernet
Rozměry	136 (Š) mm x 237 (H) mm x 147 (V) mm
Hmotnost	1.9 kg
Napájení	Vstup: 100~240 V, 50/60 Hz Výstup: DC24 V, 2 A

Formát souboru snímků	TIFF / RAW		
Podporované protokoly	DICOM 3.0, TWAIN		
Podporované velikosti pam. fólií	Velikost	Vysoké rozlišení	Standard
	0 (31 x 22 mm)	880 x 1240	440 x 620
	1 (40 x 24 mm)	960 x 1600	480 x 800
	2 (41 x 31 mm)	1240 x 1640	620 x 820
	3 (54 x 27 mm)	1080 x 2160	540 x 1080
Velikost pixelu		25 µm	50 µm

Komponenty

1. GenX-CR skener
2. Napájecí kabel
3. 24VDC Napájecí adaptér
4. RJ45 CAT.6 kabel
5. Krabička na pam. fólie (na 1 ks)
6. USB flash disk (Ovladače, Nástroje)
7. Uživatelský manuál
8. PF (Vel. 0, 2) (2 ks pro každou velikost)
9. Ochranný obal (Vel. 0, 2)
10. Hygienický návlek (Vel. 0, 2)

Rozměry





GENORAY Co.,Ltd.

T +82-31-5178-5500
E genoray@genoray.com
W www.genoray.com

GENORAY America Inc.

T +1-855-436-6729
E inquiry@genorayamerica.com
W www.genorayamerica.com

GENORAY EU GmbH

T +49-30-50969498
E info@genorayeuropa.com
W www.europe.genoray.com

GENORAY Japan

T +81-45-620-4971
E Info@genorayjapan.co.jp
W www.genorayjapan.co.jp

GENORAY Türkiye

T +90-216-463-57-37, +90-216-463-57-53
E genorayturkiye@genoray.com
W www.turkiye.genoray.com

GENORAY Shanghai

T +86-021-6785-8538
E genoraychina@genoray.com
W www.genoray.com.cn



* Tento rentgenový přístroj může být nebezpečný pro pacienta i obsluhu, pokud nejsou dodrženy bezpečné expoziční faktory a provozní pokyny.